




Manual de uso de Ori

Ori es tu asistente de **optometría clínica, terapia visual, entrenamiento visual deportivo, contactología y audiolología**. Responde en español **basándose en tus propios documentos** y te dice claramente cuando no está en ellos.

Importante: usa siempre **casos anonimizados** (sin nombres, DNI, teléfonos ni datos que identifiquen al paciente). Ori es una herramienta de apoyo: el juicio clínico final es tuyo.

1. Entrar en Ori: código y perfiles

1. Abre Ori (acceso directo **Ori** del escritorio o la dirección que te haya dado tu centro).
2. Escribe el **código de acceso del equipo** y pulsa **Entrar**.
3. Elige **¿Quién eres?** pulsando tu perfil. Puedes crear perfiles nuevos con **Añadir perfil** (nombre, color o foto). No hay contraseñas individuales.

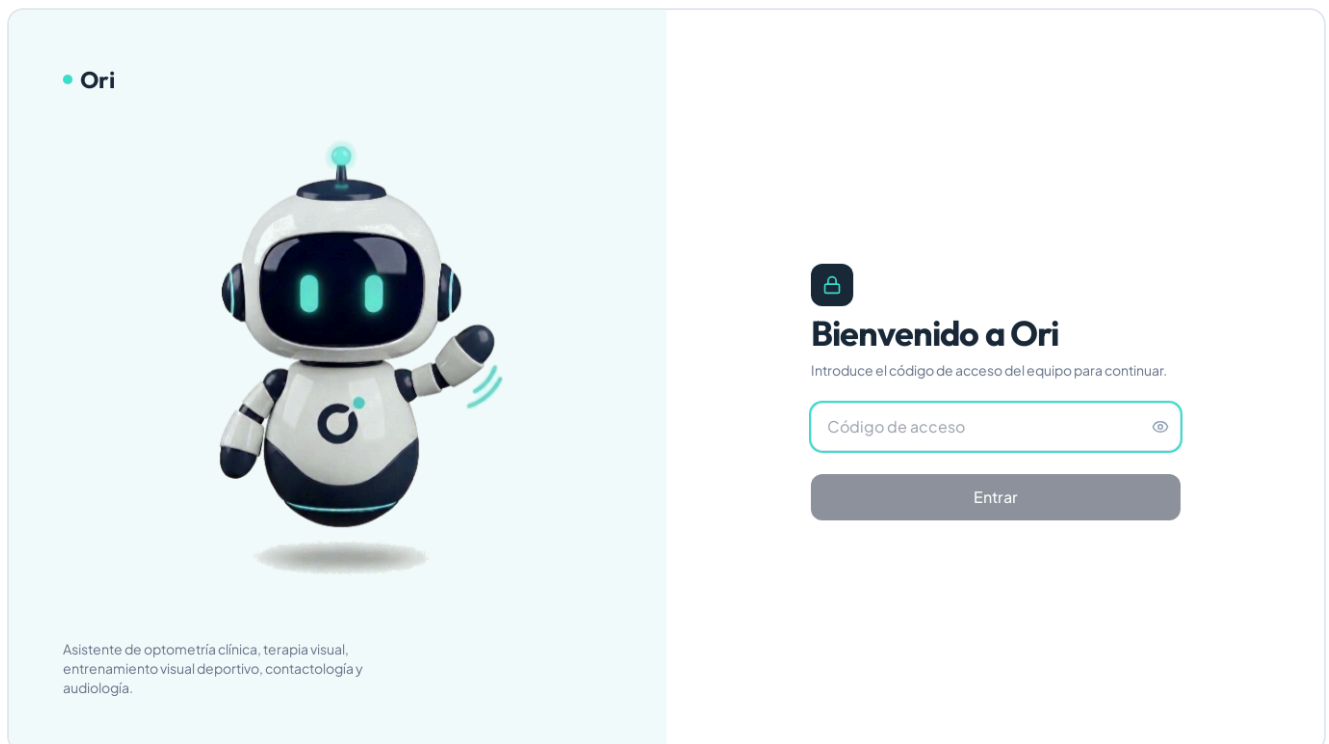

Para cambiar de perfil o cerrar sesión, usa el menú con tu nombre (arriba a la derecha).

2. Chat

Escribe tu pregunta abajo y pulsa **Enviar** (o Intro). Ori busca en tus documentos y responde citando de dónde sale cada dato.

The screenshot shows the Ori chat interface. At the top is a navigation bar with icons for Ori, Chat, Biblioteca, Chuletas, Plantillas, Calculadoras, Favoritos, Ajustes, Ayuda, Descargas, and a user profile for Paula. The main chat area has a title 'Neurovisión aplicada al rendimiento deportivo' and a '+ Nueva conversación' button. On the left, there's a sidebar with 'VER CONVERSACIONES DE' and a list of conversations, including one titled 'Neurovisión aplicada al rendimi...' with 7 oct and 1 preguntas. The chat content shows a response from Ori about 'la programación neuromotora' and 'Recuperación post-conmoción'. It includes a list of bullet points: 'Evaluación post-conmoción' and 'Consideraciones sobre tecnología'. Below the text, there's a section 'FUENTES DE TUS DOCUMENTOS' with several document links like 'goalkeepercuesanddrill.pdf - p. 2', 'quieteyequietbrain4weeks.pdf - p. 1', and others. At the bottom, there's a search bar 'Pregunta a Ori sobre tus documentos...' and a row of buttons: 'Mi biblioteca', 'Común', 'Ambas', 'Buscar en internet', and 'Usar plantilla...'. There are also icons for 'Copiar' and 'Favorito'.

- **Alcance:** elige dónde buscar: **Mi biblioteca, Común o Ambas.**
- **Buscar en internet:** solo si lo activas, Ori busca también en la web. Las fuentes web aparecen como [W1], [W2]... y se pueden pulsar.
- **Referencias:** cada cita del texto, como [archivo.pdf, p. 3], es un enlace. Al pulsarla se abre a la derecha el documento en la página citada (PDF), la imagen o el texto resaltado (Word, Excel, PowerPoint), con los botones **Abrir en pestaña nueva** y **Descargar**.
- **Si no está en tus documentos,** Ori lo dice ("No lo encuentro en tus documentos") y no se lo inventa.
- **Acciones rápidas:** botones con peticiones frecuentes (interpretar un caso, plan de terapia visual, audiometría, lentes de contacto...). Se pliegan solos a los 3 segundos; ábrelos con **Acciones rápidas ▶**.
- **Plantillas:** elige una plantilla en el selector para que Ori la rellene con el caso; lo que falte queda como [pendiente].
- **Dictado por voz:** pulsa el micrófono y habla (funciona en Chrome o Edge). El texto aparece en el cuadro para que lo revises antes de enviar.
- **Copiar y favoritos:** debajo de cada respuesta puedes copiarla o guardarla con la estrella.

The screenshot shows the Ori AI interface. At the top is a navigation bar with icons for Chat, Biblioteca, Chuletas, Plantillas, Calculadoras, Favoritos, Ajustes, Ayuda, and Descargas. The user's name 'Paula' is in the top right.

On the left, there's a sidebar for 'VER CONVERSACIONES DE' with a search bar and a list of conversations. One conversation is titled 'Neurovisión aplicada al rendimi...' with 7 oct-1 preguntas.

The main chat area shows a conversation titled 'Neurovisión aplicada al rendimiento d...'. The user asks: '¿Qué dicen mis documentos sobre la neurovisión en el deporte? Cita páginas.' The AI responds with a summary based on provided documents and lists two key points: 'Método NeuroVision' and 'Entrenamiento de rendimiento'.

Below the chat, there's a section for 'Acciones rápidas' with a toggle for 'Solo casos anonimizados' and a search bar for 'Pregunta a Ori sobre tus documentos...'. It includes options for 'Mi biblioteca', 'Común', 'Ambas', and 'Buscar en internet'.


On the right, a PDF document titled 'goalkeepercuesanddrill.pdf' is open, showing a 'CONTENTS' page with a table of contents.

Conversaciones

En la columna izquierda están tus conversaciones. Puedes **buscar**, **ordenar** (Recientes, Orden personalizado, Nombre), **fijar arriba**, **renombrar** y **eliminar** desde el menú Ori pone un título automático a cada conversación nueva. Puedes ver las conversaciones de otros perfiles (solo lectura). Oculta la columna con el botón de panel o con **Ctrl+B**.

3. Biblioteca


Aquí subes tus documentos: **PDF (también escaneados)**, **Word**, **Excel**, **PowerPoint** e imágenes (**PNG/JPG**).

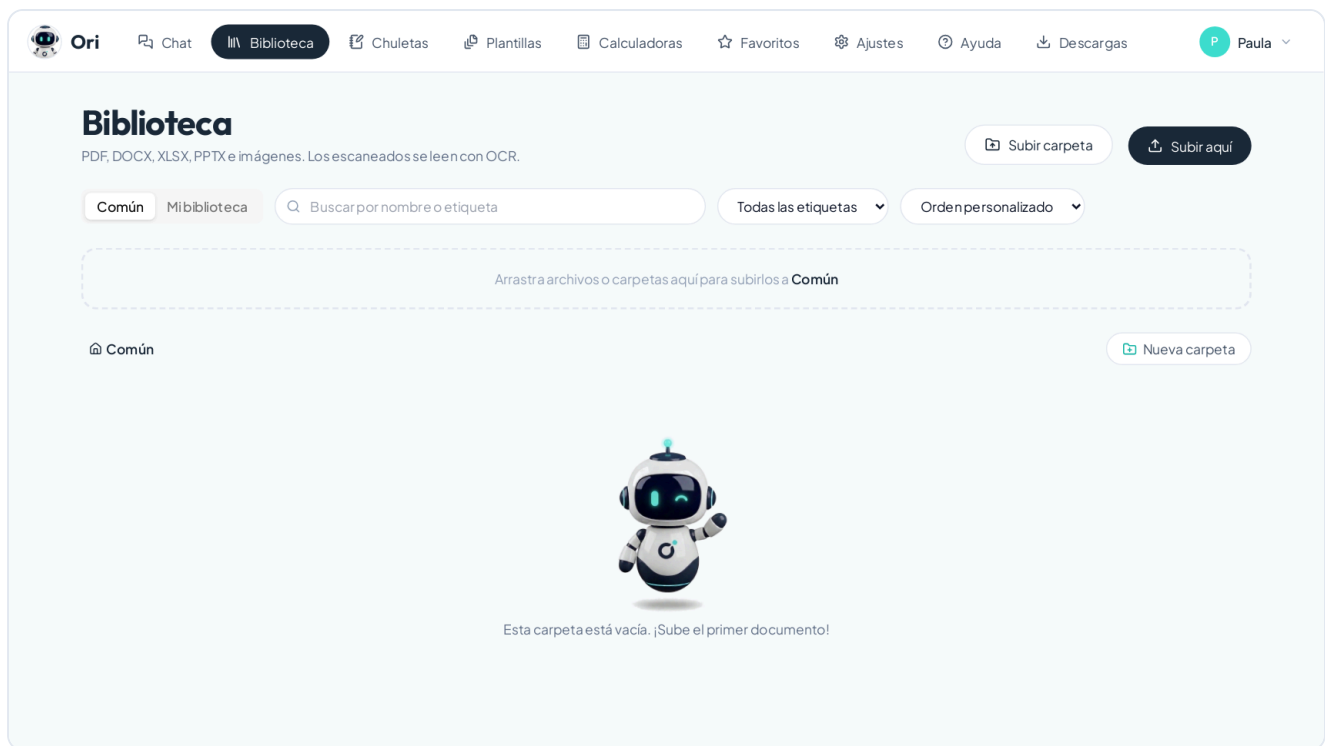

- **Común** la ve todo el equipo; **Mi biblioteca** es solo tuya.
- **Subir**: botón **Subir archivos** o arrastrando archivos a la ventana.
- **Subir carpeta**: botón **Subir carpeta** o arrastrando una carpeta entera. Ori recrea las subcarpetas, omite archivos ocultos o no compatibles y te muestra un resumen.
- **Carpetas**: crea, renombra, mueve (arrastrando el documento encima de una carpeta o con **Mover a...**) y elimina. Al borrar una carpeta, su contenido pasa a la carpeta superior: nunca se borran documentos sin avisar.
- **Etiquetas y notas**: añade etiquetas para filtrar y notas propias; las notas también sirven a Ori como conocimiento.
- Los PDF escaneados y las imágenes se leen con OCR; puede tardar un poco. El estado aparece en cada tarjeta.

4. Chuletas


Resúmenes listos para estudiar o consultar, creados **solo a partir de los documentos que elijas**, con citas de página.

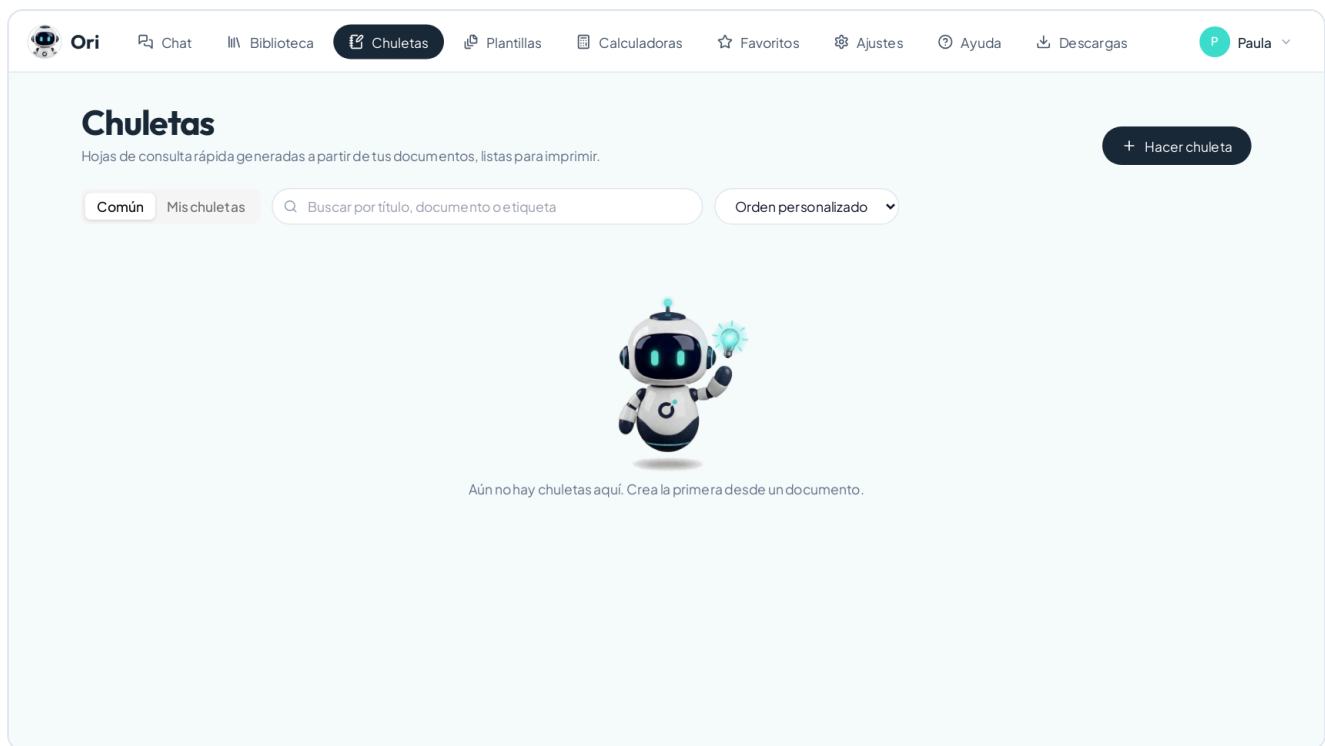

1. Pulsa **Nueva chuleta** (o **Hacer chuleta** en un documento).
2. Elige documentos, formato (Resumen, Tabla, Esquema, Preguntas-respuesta o Libre) y, si quieres, una instrucción.
3. Puedes **editarla**, **regenerarla**, **copiarla**, **imprimirla en A4** o **guardarla en la biblioteca** para que Ori también la use al responder.

5. Plantillas

Crea tus modelos de informe, protocolos de terapia visual, planes de entrenamiento deportivo, audiolología o contactología. Usa marcadores como `{{nombre_campo}}`. Pueden ser **comunes** (todo el equipo) o **personales**.

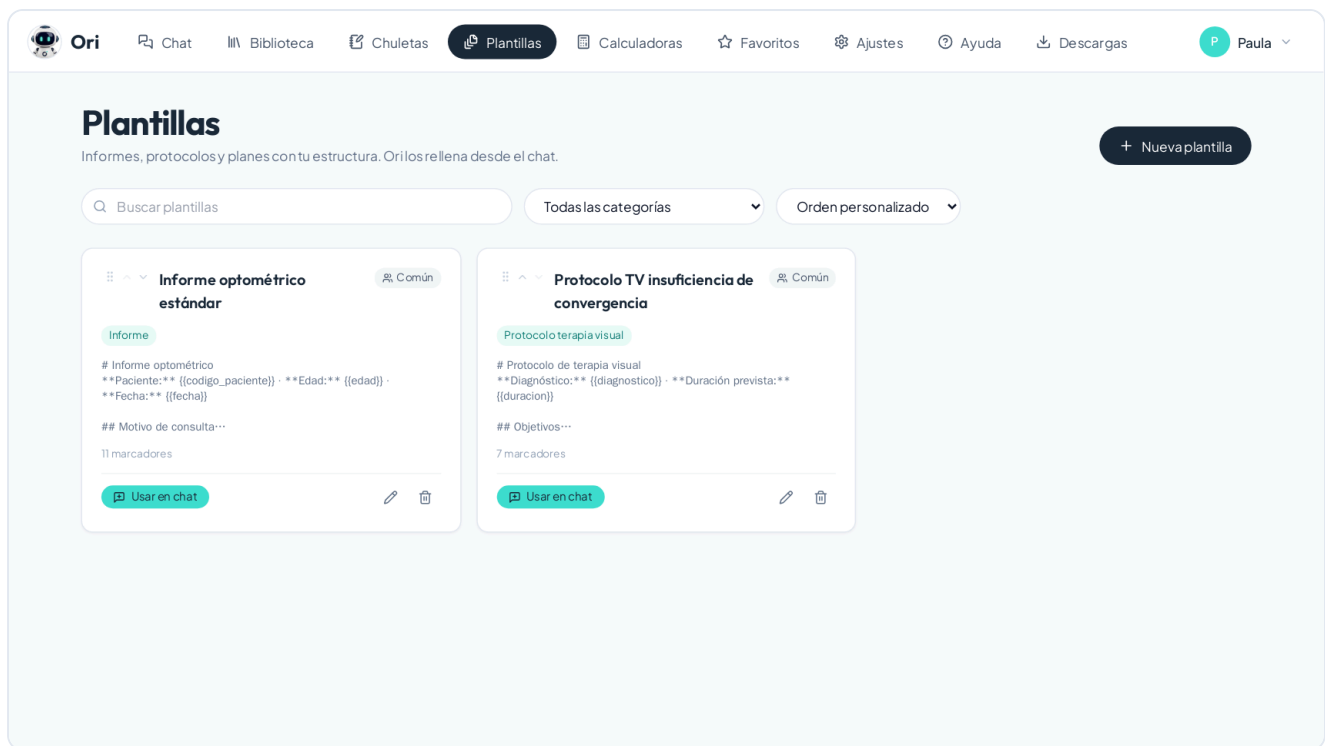

6. Calculadoras

Cálculos exactos (sin IA) con su fórmula y referencia: amplitud de acomodación (Hofstetter), dioptrías prismáticas ↔ grados, regla de Prentice, AC/A, demanda acomodativa, equivalente esférico, transposición de cilindro, distancia al vértice, criterios de Sheard y Percival y tabla de valores normativos.

Lentes de contacto (sobrerefracción), con dos modos:

- **Sobrerefracción con lente puesta:** combina la lente actual con la sobrerefracción y tiene en cuenta la rotación de la lente.
- **Primera adaptación desde gafa:** aplica distancia al vértice y la compensación de rotación (LARS).

Muestra resultado exacto, lente sugerida redondeada y los pasos. Es orientativo: verifica con la guía del fabricante.

Ori

Chat

Biblioteca

Chuletas

Plantillas

Calculadoras

Favoritos

Ajustes

Ayuda

Descargas

Paula

Sobrerrefracción con lente puesta: Solo si |potencia| ≥ 4 D

LENTE ACTUAL (ROTULADA)

Esfera

Cilindro (-)

Eje

180°

SOBRERREFRACCIÓN (PLANO DE GAFA)

Esfera

Cilindro (-)

Eje

180°

Distancia al vértice

Rotación observada

Sentido

12 mm

0°

Izquierda(horario)

Rotación vista por el examinador. Si la marca inferior se desplaza a tu izquierda (sentido horario), es rotación a la izquierda: LARS → se suma (Left Add); a la derecha se resta (Right Subtract).

Fórmula: Vértice por meridiano: $F_c = F / (1 - d \cdot F)$ · Vectores: $M = E + C/2$, $J_0 = -(C/2) \cdot \cos 2\theta$, $J_{45} = -(C/2) \cdot \sin 2\theta$ · Eje en ojo = eje rotulado - rotación · Eje a pedir = eje necesario + rotación (LARS)

Referencia: Thibos (vectores de potencia), regla LARS. Orientativo: verifica con la calculadora/guía del fabricante.

Valores normativos de referencia

Normas de referencia (solo lectura). Dependen del método, el estímulo y la población; contrástalas con tu bibliografía y tus protocolos.

PRUEBA

VALOR ESPERADO

FUENTE

7. Favoritos

Las respuestas y conversaciones guardadas con la estrella. Las ve todo el equipo, con quién las guardó.

8. Ordenar a tu gusto

En Biblioteca, Chuletas, Plantillas, Calculadoras, Favoritos, acciones rápidas y conversaciones puedes elegir **Orden personalizado** y mover elementos arrastrando el asa  o con las flechas **Subir/Bajar**.

También puedes ordenar por **Nombre** o **Fecha**.

9. Copias de seguridad

En **Ajustes** → **Copia de seguridad**:

- **Exportar copia de seguridad** descarga un único archivo .zip con todo (perfiles, documentos y archivos originales, carpetas, chuletas, plantillas, conversaciones, favoritos y ajustes). **Tu clave de Gemini no se incluye.**
- **Importar copia:** elige el .zip y el modo **Fusionar** (añade y actualiza) o **Reemplazar todo** (deja Ori exactamente como en la copia).


Haz una copia cada semana y guárdala en un USB o en la nube.

Copias automáticas

En **Ajustes** → **Copias automáticas** (activadas por defecto): **se hace una copia al abrir Ori** (la primera vez de cada día, en segundo plano, sin esperar) **y se guardan los últimos 3 días**; las más antiguas se

borran solas. Se guardan en el propio PC, en `C:\Users\<usuario>\AppData\Local\Ori\backups`, con el nombre `ori-backup-AAAA-MM-DD_HHMM.zip`, y se pueden **Descargar** desde la lista o recuperar con **Importar copia**. El botón **Hacer copia ahora** hace una al momento. Si una copia falla, verás un aviso en rojo arriba en Ori y en Ajustes.

Las copias automáticas protegen frente a errores o borrados, pero están en el mismo PC: si el PC se estropea, se pierden. Por eso conviene además **exportar una copia** de vez en cuando y guardarla fuera (USB o nube).

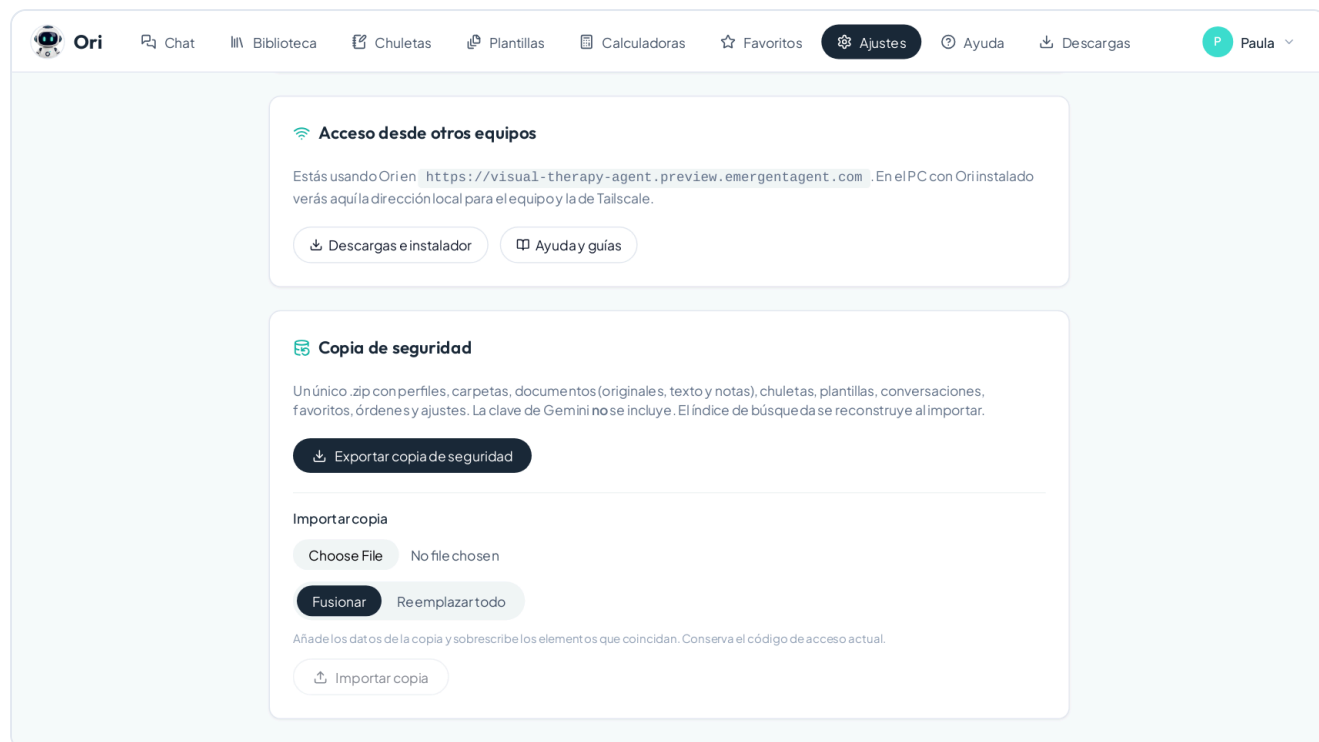

10. Ajustes y modelo de IA

- **Proveedor de IA:** por defecto **Gemini** (Google) con tu clave gratuita. Puedes pegar o cambiar la clave aquí.
- **Ollama (opcional):** si tienes Ollama instalado en el PC, puedes indicar su dirección y modelos para usarlo como alternativa local.
- **Código de acceso del equipo:** cámbialo cuando quieras; todos tendrán que entrar con el nuevo.
- **Acceso desde otros equipos:** muestra la dirección para que tu equipo entre desde otros PCs y, si tienes Tailscale, la dirección para entrar desde casa.

Límites gratuitos de Gemini

La clave gratuita tiene un número limitado de peticiones por minuto y por día. Si se alcanza, Ori muestra: *"Ori está descansando un momento (límite gratuito alcanzado)"*. Espera unos segundos o minutos y

vuelve a intentarlo. Leer muchos PDF escaneados a la vez consume más; Ori los procesa en cola para no pasarse.